

HAEBERLE

Mobile Arbeitsplätze

NEU LED-Modelle

effizient und elegant

Röntgenfilmbetrachter



EUROSKOP® + Mediskop®

EUROSKOP®-Röntgenfilmbetrachter

Die Röntgenfilmbetrachter verbinden elegantes Design mit moderner Technologie und bestechen durch Qualität und beeindruckende Optik.

Unsere aktuellen **EUROSKOP®- Geräteserien K-LED** sowie **KJ-LED** und **LJ-HF mit Jalousien** bieten Ihnen das, was Sie als Nutzer erwarten:

- Elegantes Design
- Normgerechte Technik
- Einfache und bequeme Bedienung
- Energieersparnis bei den LED-Geräten
- Optimale Helligkeitsregulierung und flimmerfreies, augenschonendes Hochfrequenzlicht bei der Serie LJ-HF
- Serienmäßiger Perlonfaden
- Deutsche Qualität mit langer Lebensdauer
- Pflegefreundliche, hygienische Flächen
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



EUROSKOP® K-LED / KJ-LED - die **Komfort-Serie** mit energiesparender LED-Technik, helligkeitsregulierbar. Regelbereich 90 %.

EUROSKOP® LJ-HF - die **Luxus-Serie** mit 4 Leuchtstofflampen in helligkeitsregulierbarer HF-Technologie. Der riesige Regelbereich erlaubt ein Absenken der Leuchtdichte auf 500 cd/m².

EUROSKOP®-Geräte

mit Jalousien



Lichtstärke und Ausleuchtung:

Die Geräteserien erfüllen höchste Ansprüche bezüglich gleichmäßiger Ausleuchtung und Leuchtdichte. Alle Modelle sind mit handelsüblichen Tageslichtröhren bzw. LED-Technik ausgestattet. Spezielle Vorschaltgeräte gewährleisten geringe Wärmeabgabe der Geräte. Die LED-Technik gewährleistet Energieeinsparung bis zu 50 %.

Helligkeitsregulierung:

Die Modelle K-LED, KJ-LED und LJ-HF sind serienmäßig mit stufenloser elektronischer Helligkeitsregulierung ausgestattet.

Hochfrequenz-Technologie:

Im Operationssaal und überall dort, wo viel befundet wird empfehlen wir Geräte mit absolut flimmerfreier Hochfrequenz-Technologie. Dieses schont die Augen des Betrachters und ermöglicht das Ablichten von Röntgenfilmen mit der 3-D-Kamera.

Hygiene:

Die EUROSKOP®-Röntgenfilmbetrachter haben glatte, desinfektionsmittelbeständige Oberflächen. Die Geräte ohne Jalousien haben eine fugenlose Front; bei Geräten mit Jalousien sind die Jalousieführungen am Rande der Frontplatte verdeckt geführt und nicht wie sonst üblich in einer Längs- und Queröffnung innerhalb der Frontplatte. Diese Ausführung erfüllt auch im Operationssaal die geforderte Sicherheit in Bezug auf Asepsis.

Service-Freundlichkeit

wird bei uns groß geschrieben: alle Bedienelemente sind an der Frontblende angebracht. Zum Auswechseln der Röhren läßt sich die Frontblende sehr einfach abnehmen. Die Elektroanschlüsse lassen sich durch Steckverbinder problemlos trennen.

Montage/Einbau:

Die Montage ist überaus einfach. Ganz gleich, ob die EUROSKOP®-Röntgenfilmbetrachter in die Wand eingebaut oder aufgehängt werden. Der Einbau in Wänden ist mit Spezialklemmvorrichtungen ohne Zarge leicht möglich.

EUROSKOP®-Modell


mit Verblendungsrahmen für Wandeinbau




Klemmvorrichtung
für Wandeinbau

Einbau-Skizzen


LJ-HF

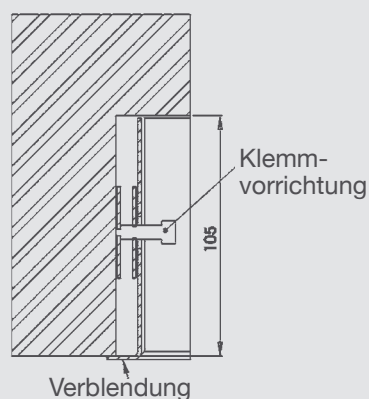


K-LED / KJ-LED

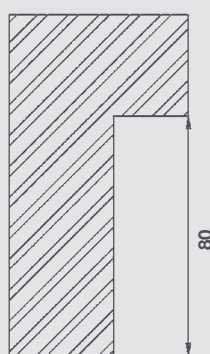

Informationen für die Elektroplanung

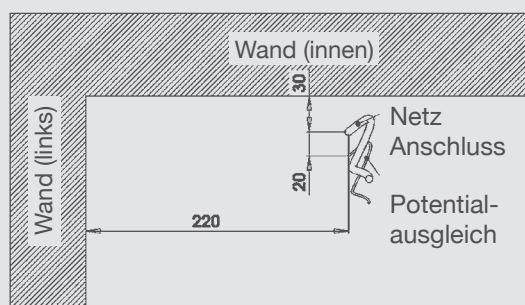

Empfohlene Montagehöhe

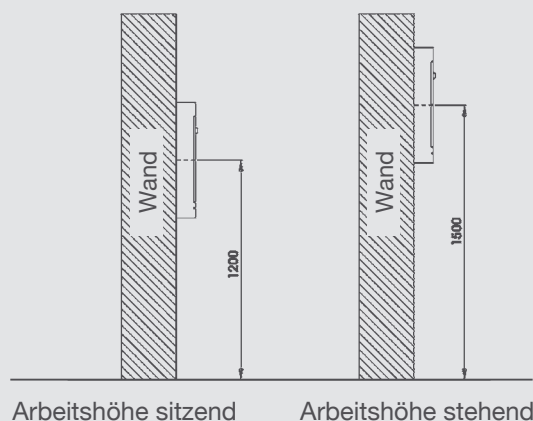

Nischenmaße für Wandeinbau

Die Geräte-Typen eignen sich für den Einbau in Nischen mit hinreichender statischer Festigkeit der rechten und linken Nischeninnenwand mit folgenden Abmessungen:

Typ	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
LJ-HF				
40	612 ± 2	637 ± 2	min. 105	14
80	1012 ± 2	637 ± 2	min. 105	20
105	1262 ± 2	637 ± 2	min. 105	23
120	1412 ± 2	637 ± 2	min. 105	27
140	1612 ± 2	637 ± 2	min. 105	29

Mediskop[®]-Geräteserie

Einen optischen Blickfang für Ihre Praxis bieten Ihnen unsere **Mediskop[®]-Geräte 560** und **860** mit Ein-/Ausschalter oder die Modelle **560-HF** und **860-HF** mit Helligkeitsregulierung und Hochfrequenztechnologie.

- Modernes Design
- Silbergraues Aluminiumgehäuse
- Frontscheibe aus Acrylglas
- Graue Dekorecken
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Großer Helligkeitsregulierbereich
- Rundumlaufende Filmhalteschiene
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Hochfrequenztechnologie (HF)



Alle Geräte-Serien sind technisch auf dem neuesten Stand und entsprechen allen relevanten Normen.

Detaillierte Informationen und passendes Zubehör zu den einzelnen Modellen finden Sie in der Röntgenfilmbetrachter-Preisliste.

Wir erfüllen Ihnen auch spezielle Wünsche:

- Sonderlackierungen in allen RAL-Farben
- Sonderspannungen

Für Fragen ist unser Berater-Team gerne für Sie da.



Ihr medizin-technischer Fachhändler

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de