

**HAEBERLE**

Mobile Arbeitsplätze

**Typenliste** gültig ab 1. Juli 2019

# profilstark und robust

Gerätewagensysteme



**SWINGO**<sup>®</sup>

swingo

# SWINGO® 45 und 60

## Das profilstarke Gerätewagensystem in Holz-Kunststoff-Version

Basis des **swingo®** Wagensystems ist ein starkes **Aluminium-Trägerprofil**. Es bietet viele Befestigungsmöglichkeiten für diverse Systemteile und Zubehör. Ein integrierter Kabelkanal ermöglicht komfortables Kabelmanagement. Im Profil können von oben Stangen mit Ø 25 mm platzsparend eingeschoben werden. Platten und Schubladen lassen sich in Rasterhöhe bequem befestigen.

- **Fahrgestell:** Aus Stahlrohr Feinstruktur matt, grau (RAL 7012) pulverbeschichtet.
- **Rollen:** Serienmäßige Leichtlaufrollen, Ø 100 mm oder Ø 125 mm mit grauen Stoßschutzkappen. Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.

- **Platten:** Holz-Kunststoff-Kombination, hochwertig weiß beschichtet, mit allseitig umlaufenden Massivkanten (22 mm stark), lichteht und formaldehydfrei.
- **Schubladen:** Holz-Kunststoff-Kombination, hochwertig beschichtet, lichteht und formaldehydfrei. Schwebelichte Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, geschlossene, leicht zu reinigende Flächen.
- **Farben:** Schiebegriffe und Dekorstreifen in 3 Akzentfarben nach NCS-Design-Skala: grau, blau, gelb. Schubladengriffe sind zusätzlich in rotviolett, türkis, weiß und schwarz erhältlich.

- **Traglast:** Schubladen-Flächenbelastung bis 10 kg, Platten-Flächenbelastung bis 30 kg, maximale Gesamtlast unter Berücksichtigung der Kippsicherheit bis 120 kg.

- **Maße:**

Breite	swingo® 60: 700 mm
	swingo® 45: 545 mm
Tiefe	swingo® 60: 560 mm
	swingo® 45: 560 mm

- **Höhen:** unterschiedlich, je nach Modell. Sonderhöhen auf Wunsch lieferbar. Rasterhöhe 52 mm.

Ein Qualitätsprodukt made in Stuttgart. Geschmacks- und gebrauchsmustergeschützt, Europäisches Patent.

# SWINGO®-clinic 45 und 60

## Das robuste Gerätewagensystem in Metall-Version

**swingo®-clinic** ist die Serie in Metallausführung für die Klinik. Optisch ist das System exakt auf die **swingo®**-Linie abgestimmt und bietet zahlreiche weitere Vorteile:

- **Robuste, verwindungsfeste Metallausführung** mit hoher Belastbarkeit bis 130 kg bei Rollen mit Ø 100 mm oder 125 mm, bis 250 kg bei Rollen mit Ø 150 mm.

- **Platten und Schubladen:** aus hochwertig beschichtetem Stahlblech, desinfektionsmittel-fest, leicht zu reinigen und lichteht, grauweiß (RAL 9002). Alle Platten sind einheitlich

22 mm stark und sehr stabil. Durch die vierfache Befestigung wird eine unerwünschte Neigung der Platten bei Belastung vermieden. Flächenbelastung bis 50 kg.

- **Das starke Aluminium-Trägerprofil** bietet ungeahnte Befestigungsmöglichkeiten für Systemteile und Zubehör aller Art.
- **Der integrierte Kabelkanal** bietet komfortables Kabelmanagement.
- **Schubladen** mit Teleskop Vollauszug und moderner Führung sichern hohen Bedienkomfort. Flächenbelastung bis 10 kg.

- **Rollen:** hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen (Ø 100, 125 oder 150 mm) garantieren auch in voll beladenem Zustand die problemlose Manövrierfähigkeit der Wagen.

- **Farben:** Schiebegriffe und Dekorstreifen in 3 modernen Akzentfarben grau, blau, gelb sind nach NCS-Design-Skala wählbar. Schubladengriffe sind zusätzlich in rotviolett, türkis, weiß und schwarz erhältlich.

Bitte die praktischen und form-schönen Schiebegriffe separat bestellen.



### Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicherer Schutz bietet ein Potentialausgleich.

Deshalb wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung dazu bestellen. Unser Team berät Sie gerne.

Beim Gerätewagensystem **swingo-clinic** wird ein POAG-Pin hinten in der Bodenplatte befestigt. Eine Nachrüstung seitens des Kunden ist bei diesem Wagensystem nicht möglich.

### Achtung:

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Funktionswagen – mit Ausnahme des Basismodells mit einer Schublade – werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

Bitte beachten Sie: Die Rücksendung von zerlegter Ware wird nur anerkannt, wenn die Teile noch nicht montiert waren und in einwandfreiem Zustand sind!

Eine besondere Spezialität des Hauses **HAEBERLE** sind maßgeschneiderte **OEM-Versionen** für Industriekunden. Sie nennen uns Ihre Spezifikationen und wir konfigurieren Ihren Gerätewagen. Fragen Sie uns!



Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## swingo® 35 - Sondermodell $\hat{=}$ Plattenbreite 350 mm

swingo®  
Holz-Kunststoff

swingo®-clinic  
Metall

### Sonographiewagen



Fahrgestell mit Bodenplatte, Rollen  $\varnothing$  100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 645 mm, oben 1 Platte mit Sondermaß 350 x 550 mm (B x T) mit Frontgriff, 1 Ablageplatte 350 x 450 mm (B x T), Quertraverse, lichte Höhe zwischen den Platten: 240 mm.

**Maße:**  
450 x 610 x 811 mm (B x T x H)

### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau	16831
blau	16832
gelb	16834

## swingo® 45 + swingo®-clinic 45 $\hat{=}$ Plattenbreite 450 mm

### Basiswagen / Gerätewagen

### Basiswagen



mit 1 Schublade, Rollen  $\varnothing$  100 mm; Schiebegriffe bitte extra bestellen; Lieferung zerlegt; Montage gegen Aufpreis möglich.

**Maße:**  
545 x 560 x 811 mm (B x T x H)

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau	13191
blau	13192
gelb	13194

### mit POAG-Pin

13171
13172
13174

Bei Trägerprofil-Höhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen muss zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse, eingebaut werden. Lieferung erfolgt ohne Aufpreis montiert.

### Gerätewagen 1



Fahrgestell mit Rollen  $\varnothing$  100 mm, 2 Feststellern, Quertraverse, 4 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch.

**Maße:**  
545 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau	13881
blau	13882
gelb	13884

### mit POAG-Pin

13691
13692
13694

### Gerätewagen 2



Fahrgestell mit Rollen  $\varnothing$  100 mm, 2 Feststellern, Quertraverse, 3 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Auszugsplatte 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch.

**Maße:**  
545 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

### Schubladengriff und Dekorstreifen in:



grau	16871
blau	16872
gelb	16874

### mit POAG-Pin

13721
13722
13724

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## Endoskopiewagen / Ergometriewagen

		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p><b>Endoskopiewagen</b></p>	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern, 5 Ablageplatten 450 mm tief, Quertraverse, 1 Schublade 100 mm hoch.</p> <p><b>Maße:</b> <b>545 x 560 x 1.417 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>grau</td> <td style="text-align: right;"><b>13821</b></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> <p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13081</b></p> <p><b>13082</b></p> <p><b>13084</b></p> </td> </tr> <tr> <td>blau</td> <td style="text-align: right;"><b>13822</b></td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td style="text-align: right;"><b>13824</b></td> </tr> </table>		grau	<b>13821</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13081</b></p> <p><b>13082</b></p> <p><b>13084</b></p>	blau	<b>13822</b>	gelb	<b>13824</b>
		grau	<b>13821</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13081</b></p> <p><b>13082</b></p> <p><b>13084</b></p>						
blau	<b>13822</b>									
gelb	<b>13824</b>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p><b>Ergometriewagen</b></p>	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, 1 Schublade 100 mm hoch, obere Platte 300 mm tief, Kabel und Schlauchhalter, Ref.-Nr.13926.</p> <p><b>Maße:</b> <b>545 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>grau</td> <td style="text-align: right;"><b>16451</b></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> <p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>16461</b></p> <p><b>16462</b></p> <p><b>16464</b></p> </td> </tr> <tr> <td>blau</td> <td style="text-align: right;"><b>16452</b></td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td style="text-align: right;"><b>16454</b></td> </tr> </table>		grau	<b>16451</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>16461</b></p> <p><b>16462</b></p> <p><b>16464</b></p>	blau	<b>16452</b>	gelb	<b>16454</b>
		grau	<b>16451</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>16461</b></p> <p><b>16462</b></p> <p><b>16464</b></p>						
blau	<b>16452</b>									
gelb	<b>16454</b>									

## swingo® 60 + swingo®-clinic 60 ≙ Plattenbreite 600 mm





### Basiswagen / Unterfahrwagen / Schublade

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p><b>Basiswagen</b></p>	<p>mit 1 Schublade, Rollen Ø 100 mm; Lieferung zerlegt; Montage gegen Aufpreis möglich.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 811 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>grau</td> <td style="text-align: right;"><b>13011</b></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> <p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13001</b></p> <p><b>13002</b></p> <p><b>13004</b></p> </td> </tr> <tr> <td>blau</td> <td style="text-align: right;"><b>13012</b></td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td style="text-align: right;"><b>13014</b></td> </tr> </table>		grau	<b>13011</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13001</b></p> <p><b>13002</b></p> <p><b>13004</b></p>	blau	<b>13012</b>	gelb	<b>13014</b>		
		grau	<b>13011</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13001</b></p> <p><b>13002</b></p> <p><b>13004</b></p>								
blau	<b>13012</b>											
gelb	<b>13014</b>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p><b>Unterfahrwagen</b></p>	<p>zum mobilen Einsatz von Geräten unter einer Behandlungsliege. Mit 1 Schublade, Rollen Ø 100 mm; Lieferung zerlegt; Montage gegen Aufpreis möglich.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 500 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>grau</td> <td style="text-align: right;"><b>13111</b></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> <p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13071</b></p> <p><b>13072</b></p> <p><b>13074</b></p> </td> </tr> <tr> <td>blau</td> <td style="text-align: right;"><b>13112</b></td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td style="text-align: right;"><b>13114</b></td> </tr> </table>		grau	<b>13111</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13071</b></p> <p><b>13072</b></p> <p><b>13074</b></p>	blau	<b>13112</b>	gelb	<b>13114</b>		
		grau	<b>13111</b>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13071</b></p> <p><b>13072</b></p> <p><b>13074</b></p>								
blau	<b>13112</b>											
gelb	<b>13114</b>											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px; height: 150px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div> <p><b>Schublade 100 mm hoch</b></p>	<p>Mit schwebelichter Kugel-Teleskopführung mit Einrastmechanismus</p> <p><b>Innenmaße:</b> <b>529 x 384,5 x 74 mm (B x T x H)</b></p>	<p><b>Schubladengriff in:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>grau</td> <td style="text-align: right;"><b>13101</b></td> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; background-color: #e0f2f1; padding: 5px;"> <p><b>13211</b></p> <p><b>13212</b></p> <p><b>13214</b></p> </td> </tr> <tr> <td>blau</td> <td style="text-align: right;"><b>13102</b></td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td style="text-align: right;"><b>13104</b></td> </tr> </table>		grau	<b>13101</b>	<p><b>13211</b></p> <p><b>13212</b></p> <p><b>13214</b></p>	blau	<b>13102</b>	gelb	<b>13104</b>		
		grau	<b>13101</b>	<p><b>13211</b></p> <p><b>13212</b></p> <p><b>13214</b></p>								
blau	<b>13102</b>											
gelb	<b>13104</b>											
<p>Der Basiswagen kann insgesamt mit 6 Schubladen, der Unterfahrwagen mit 3 Schubladen ausgerüstet werden.</p>	<p>Mit Vollteleskopauszug</p> <p><b>Innenmaße:</b> <b>506 x 396 x 74 mm (B x T x H)</b></p>	<table border="0"> <tr> <td>grau</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>13211</b></td> </tr> <tr> <td>blau</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>13212</b></td> </tr> <tr> <td>gelb</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>13214</b></td> </tr> </table>		grau		<b>13211</b>	blau		<b>13212</b>	gelb		<b>13214</b>
grau		<b>13211</b>										
blau		<b>13212</b>										
gelb		<b>13214</b>										

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## Gerätewagen / Computerwagen / Wagen für Monitoring / Endoskopiewagen

Praxiserprobte Kombinationen, die jederzeit ergänzt oder verändert werden können. **Die seitlichen Schiebegriffe sind in der Grundzusammenstellung nicht enthalten!** Lieferung erfolgt ohne Aufpreis montiert.

		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®- clinic Metall
<p><b>Gerätewagen 1</b></p> 	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 130 kg. 4 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch, 1 Quertraverse.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau            <b>13671</b> blau             <b>13672</b> gelb             <b>13674</b></p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13681</b> <b>13682</b> <b>13684</b></p>
<p><b>Computerwagen</b></p> <p><b>NEU</b></p> 	<p>Fahrgestell mit Bodenplatte, 300 mm tief, Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofile in Standardhöhe 645 mm, 1 Platte oben Auszugsplatte für Keyboard mit Mouse-pad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar, PC-Halter links montiert, TFT-Halter mit Quertraverse.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 811 mm (B x T x H)</b> H min. 967 mm mit TFT-Halter</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau            <b>16921</b> blau             <b>16922</b> gelb             <b>16924</b></p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>16931</b> <b>16932</b> <b>16934</b></p>
<p><b>Wagen für Monitoring</b></p> <p><b>NEU</b></p> 	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern, Trägerprofile in Standardhöhe 1218 mm, 1 Schublade 100 mm hoch, 4 Ablageplatten, Auszugsplatte für Keyboard mit Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar, TFT-Halter mit Quertraverse.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 1417 mm (B x T x H)</b> H min. 1519 mm mit TFT-Halter</p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau            <b>16941</b> blau             <b>16942</b> gelb             <b>16944</b></p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>16951</b> <b>16952</b> <b>16954</b></p>
<p><b>Endoskopiewagen</b></p> 	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 250 kg. 5 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm hoch, 1 Quertraverse zur Aufnahme einer Steckdosenleiste.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 1.445 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau            <b>13841</b> blau             <b>13842</b> gelb             <b>13844</b></p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13371</b> <b>13372</b> <b>13374</b></p>

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## Endoskopiewagen / MIC-Wagen / Ergometriewagen / Injektionswagen

swingo®  
Holz-Kunststoff

swingo®-clinic  
Metall

### Endoskopiewagen 60.2



Fahrgestell mit Bodenplatte, Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig, 2 Feststellern, 4 Ablageplatten 45 cm tief, mit 1 frontseitigem Schiebegriff. 1 Auszugplatte, Schublade 100 mm hoch, Quertraverse, Unterbau-Trennrafo, 2200 VA, mit zentralem Ausschalter (innen am Trägerprofil), seitlich Endoskophalterung mit Endoskoprohr, unten geschlossen.

**Maße:**  
700 x 560 x 1.445 mm (B x T x H)

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau  
blau  
gelb

mit POAG-Pin

16851  
16852  
16854

### MIC-Wagen



Fahrgestell nach hinten verlängert mit Bodenplatte und 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 250 kg, inklusive Quertraverse und Antirutschbelag. 5 Ablageplatten 450 mm tief, 1 Schublade 100 mm, 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter, 1 Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen.

**Maße:**  
700 x 560 x 1.445 mm (B x T x H)

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau  
blau  
gelb

13851  
13852  
13854

mit POAG-Pin

13461  
13462  
13464

### Ergometrie-/ Reizstromwagen



Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 1218 mm. Schublade 100 mm hoch, obere Platte 300 mm tief, Kabelhalter Ref.-Nr. 13926.

**Maße:**  
700 x 560 x 1.384 mm (B x T x H)

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau  
blau  
gelb

13331  
13332  
13334

Empfehlenswertes Zubehör:

**Zusätzliche Platte, 300 mm tief** (Siehe Seite 14) 13905

mit POAG-Pin

13381  
13382  
13384

13944

### Injektionswagen PicBox®Plus



Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 1218 mm. Schublade 100 mm hoch, Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung, Injektionsset PicBox® und KOMBI-Set, Kanülensammler Schluckfix (Set mit 20 Boxen), Abwurf mit Schale aus Edelstahl, Armauflage.

**Maße:**  
780 x 560 x 1.384 mm (B x T x H)

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau  
blau  
gelb

13321  
13322  
13324

Empfehlenswertes Zubehör:

**Ampullenöffner CUPFIX** 13921

**Untersuchungsleuchte** (Siehe Seite 22)

mit POAG-Pin

13391  
13392  
13394

13921

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## Injektionswagen / Notfallwagen / Narkosewagen

		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®- clinic Metall
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Injektionswagen COMPACT</b></p>  </div>	<p>Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 1218 mm. Schublade 100 mm hoch, Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung, Injektionsset COMPACT, Kanülensammler „Medi-Müll“ (Set mit 20 Boxen), Abwurf mit Schale aus Edelstahl, Armauflage.</p> <p><b>Maße:</b> <b>970 x 560 x 1.384 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau                    <b>13311</b>  blau                     <b>13312</b>  gelb                     <b>13314</b></p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p><b>Ampullenöffner CUPFIX</b>                    <b>13921</b></p> <p>(Siehe Seite 21)</p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13481</b>  <b>13482</b>  <b>13484</b></p> <p><b>13921</b></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Notfallwagen 1</b></p>  </div>	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern Tragkraft bis 250 kg. Edelstahl-Arbeitsplatte mit Schwallkante, 2 Schubladen 100 mm hoch, 1 Schublade 200 mm hoch.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 873 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau                    <b>13521</b>  blau                     <b>13522</b>  gelb                     <b>13524</b></p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p><b>Reanimationsbrett mit Halterung</b>                    <b>17370</b></p> <p>(Siehe Seite 21)</p> <p><b>Verplombung</b>                    <b>13958</b></p> <p>(Siehe Seite 13)</p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13361</b>  <b>13362</b>  <b>13364</b></p> <p><b>17370</b></p> <p><b>13958</b></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Notfallwagen 2</b></p>  </div>	<p>Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 150 mm, 2 Feststellern. Tragkraft bis 250 kg. Ablageplatte 300 mm tief mit Antirutschbelag für Defibrillator, Edelstahl-Arbeitsplatte, 450 mm tief mit Schwallkante. 2 Schubladen 100 mm hoch, 1 Schublade 200 mm hoch.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 1.185 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau                    <b>13831</b>  blau                     <b>13832</b>  gelb                     <b>13834</b></p> <p><u>Empfehlenswertes Zubehör:</u></p> <p><b>Reanimationsbrett mit Halterung</b>                    <b>17370</b></p> <p>(Siehe Seite 21)</p> <p><b>Verplombung</b>                    <b>13958</b></p> <p>(Siehe Seite 13)</p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13421</b>  <b>13422</b>  <b>13424</b></p> <p><b>17370</b></p> <p><b>13958</b></p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Narkosewagen</b></p>  </div>	<p>Fahrgestell mit Bodenplatte und 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern, Tragkraft bis 130 kg, Galerieaufsatz, 5 Schubladen 100 mm hoch.</p> <p><b>Maße:</b> <b>700 x 560 x 896 mm (B x T x H)</b></p> <p>Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.</p>	<p><b>Schubladengriff und Dekorstreifen in:</b></p> <p>grau                    <b>13861</b>  blau                     <b>13862</b>  gelb                     <b>13864</b></p>	<p><b>mit POAG-Pin</b></p> <p><b>13441</b>  <b>13442</b>  <b>13444</b></p>

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## Gynäkologiewagen / Pultwagen / Stehschreibpultwagen / Wickelwagen

swingo®  
Holz-Kunststoff

swingo®-clinic  
Metall

### Gynäkologiewagen



Basismodell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, 1 beheizbare Schublade 100 mm hoch, 1 Schublade 100 mm hoch, Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung, Abwurf mit Schale aus Edelstahl, Instrumentenabwurf mit Polypropylen-Schale. Die Leuchte ist in dieser Modell-Zusammenstellung nicht enthalten.

**Maße:**  
**700 x 560 x 811 mm (B x T x H)**

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau	<b>13341</b>
blau	<b>13342</b>
gelb	<b>13344</b>

Empfehlenswertes Zubehör:

**Steckdosenleiste 4-fach, Standard 21693**

LED-Untersuchungsleuchte (separat auf Seite 22).

**Achtung:** Falls Sie eine Leuchte dazu bestellen, dann ist nur 1 Schiebegriff möglich.

### Pultwagen



Fahrgestell mit Bodenplatte 300 mm tief, Rollen Ø 100 mm 2 Feststellern. In der Neigung verstellbare Ablageplatte 450 mm tief mit Anti-Rutschkante, Schublade 100 mm hoch, Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung. Schreibhöhe ca. 1040 mm.

**Maße:**  
**700 x 560 x 1.123 mm (B x T x H)**

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau	<b>13661</b>
blau	<b>13662</b>
gelb	<b>13664</b>

mit POAG-Pin

**13451**  
**13452**  
**13454**

### Stehschreibpultwagen



Fahrgestell mit Bodenplatte 300 mm tief, Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Schublade 100 mm hoch. Pultaufsatz bestehend aus geneigter Schreibplatte, Maße: 600 x 450 mm (B x T). Utensilieneinsatz und Stifteköcher, Ablagefach, lichte Höhe (vorne): ca. 200 mm. Schreibhöhe: ca. 1030 mm

**Maße des Wagens:**  
**700 x 560 x 1.150 mm (B x T x H)**

Seitliche Schiebegriffe finden Sie auf Seite 11.

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau	<b>13351</b>
blau	<b>13352</b>
gelb	<b>13354</b>

### Wickelwagen



Fahrgestell mit Rollen Ø 100 mm, 2 Feststellern, Trägerprofilsatz in Standardhöhe 645 mm. Gepolsterte Wickelauflage (wechselnde Dekore), Ablageplatte für Zubehör, Schublade 200 mm hoch, rechts Ablagekorb für Creme oder Puder, links 1 Abfallsammler "tomo".

**Maße:**  
**700 x 750 x 928 mm (B x T x H)**

#### Schubladengriff und Dekorstreifen in:

grau	<b>12261</b>
blau	<b>12262</b>
gelb	<b>12264</b>

Wickelauflage

einzel (wechselnde Dekore)

**14875**



# Systemteile für swingo + swingo-clinic 45 und 60

## Fahrgestelle

Die Referenznummern beinhalten das Systemteil komplett mit Befestigungsmaterial. Individuell konfigurierte Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

### für Wagen 45

#### Fahrgestell 45 mit Bodenplatte



**Bitte beachten:**  
Um optimale Stabilität zu erreichen, **muss** jeder Wagen mindestens 1 Schublade oder 1 Quertraverse, Ref.-Nr. 16555, enthalten! Siehe Seite 17.

**Platte: 450 x 450 mm (B x T)**

**Maße: 545 x 560 mm (B x T)**

✗ Rollen Ø 100 mm, mit grauen Stoßschutzkappen

swingo® Holz-Kunststoff Ref.-Nr.	swingo®-clinic Metall ✗ Ref.-Nr.
13130	13100

✗ Rollen Ø 125 mm, 2 davon feststellbar

13120	13110
-------	-------

### für Wagen 60

#### Fahrgestell 60 mit Bodenplatte



**Bitte beachten:**  
Um optimale Stabilität zu erreichen, **muss** jeder Wagen mindestens 1 Schublade oder 1 Quertraverse, Ref.-Nr. 16554, enthalten! Siehe Seite 17.

**Platte: 600 x 450 mm (B x T)**

**Maße: 700 x 560 mm (B x T)**

✗ Rollen Ø 100 mm, mit grauen Stoßschutzkappen

swingo® Holz-Kunststoff Ref.-Nr.	swingo®-clinic Metall ✗ Ref.-Nr.
13300	13600

✗ Rollen Ø 125 mm, 2 davon feststellbar

13200	13500
-------	-------

✗ Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig, 2 davon feststellbar

13400	13700
-------	-------

#### Fahrgestell 60 hinten verlängert



zur Aufnahme von Sauerstoff-Flaschen, inkl. Quertraverse und Anti-Rutschmatte für sicheren Halt.

**Platte: 600 x 450 mm (B x T)**

**Maße: 700 x 710 mm (B x T)**

✗ Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig, 2 davon feststellbar

swingo® Holz-Kunststoff Ref.-Nr.	swingo®-clinic Metall ✗ Ref.-Nr.
13900	13800

#### Fahrgestell 45 mit Bodenplatte



die **300 mm tiefe** Bodenplatte eignet sich speziell für sitzende Tätigkeiten.

**Platte: 450 x 300 mm (B x T)**

**Maße: 545 x 560 mm (B x T)**

✗ Rollen Ø 100 mm, mit grauen Stoßschutzkappen

swingo® Holz-Kunststoff Ref.-Nr.	swingo®-clinic Metall ✗ Ref.-Nr.
16671	16672

#### Fahrgestell 60 mit Bodenplatte



die **300 mm tiefe** Bodenplatte eignet sich speziell für sitzende Tätigkeiten.

**Platte: 600 x 300 mm (B x T)**

**Maße: 700 x 560 mm (B x T)**

✗ Rollen Ø 100 mm, mit grauen Stoßschutzkappen

swingo® Holz-Kunststoff Ref.-Nr.	swingo®-clinic Metall ✗ Ref.-Nr.
16673	16674


Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## Rollen / Trägerprofile

		swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
<b>Rollen Ø 100 mm</b> 	Aufpreis für 2 feststellbare Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, Belastung bis ca. 130 kg.	13906	13906
	<b>Elektrisch leitfähig:</b> Aufpreis für 4 Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 130 kg.	13907	13907
<b>Rollen Ø 125 mm</b> 	Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 130 kg.	13938	13938
	<b>Elektrisch leitfähig:</b> Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 130 kg.	13939	13939
<b>Rollen Ø 150 mm</b> 	Aufpreis für 4 Metallrollen, Ø 150 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 250 kg.	15702	15702
	<b>Elektrisch leitfähig:</b> Aufpreis für 4 Metallrollen, Ø 150 mm, 2 davon feststellbar, Belastung bis ca. 250 kg.	13940	13940

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555 bzw. 16554 unbedingt erforderlich. Siehe Seite 16.

<b>Trägerprofile, 1 Paar Standardhöhen</b> 	Superstabile Aluminium-Trägerprofile mit integriertem Kabelkanal und Dekorstreifen in grau, blau oder gelb.  Die Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig.	<b>Profilhöhe: 645 mm</b>		
		<b>Dekorstreifen:</b>		
		grau	13611	13611
		blau	13612	13612
		gelb	13614	13614
		<b>Profilhöhe: 801 mm</b>		
		<b>Dekorstreifen:</b>		
		grau	16681	16681
		blau	16682	16682
		gelb	16684	16684
		<b>Profilhöhe: 957 mm</b>		
		<b>Dekorstreifen:</b>		
grau	13711	13711		
blau	13712	13712		
gelb	13714	13714		
<b>Profilhöhe: 1217 mm</b>				
<b>Dekorstreifen:</b>				
grau	13621	13621		
blau	13622	13622		
gelb	13624	13624		






<b>Trägerprofile, 1 Paar Individualhöhen</b> 	<b>Bitte das Maß im 52 mm-Raster angeben!</b>			
	Die Gesamthöhe des Wagens ist von der Größe der Rollen abhängig. Bitte Türhöhen beachten!			
	Farben	grau	blau	gelb
	Profilhöhe	grau	blau	gelb
	0 – 645 mm	13731	13732	13734
	0 – 1217 mm	13741	13742	13744
	0 – 1841 mm	13751	13752	13754

Artikel	Beschreibung	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
---------	--------------	----------	----------

## Zusatzkabelkanal / Schiebegriffe / Schubladengriffe

swingo®  
Holz-Kunststoff

swingo®- clinic  
Metall

<p><b>Zusatzkabelkanal</b></p> 	<p>bietet zusätzlichen Raum zur Unterbringung mehrerer Kabel.</p> <p>Elegantes Aluminiumprofil, passend zum swingo®-Profil. Montage mittig, hinten oder seitlich, rechts bzw. links an Platten.</p>	<p><b>Bitte die Höhe bei der Bestellung angeben.</b></p> <p>Höhe 957 mm      <b>16187</b></p> <p>Höhe 1217 mm      <b>16180</b></p> <p>variable Höhe 1841 mm      <b>16182</b></p>	<p><b>16187</b></p> <p><b>16180</b></p> <p><b>16182</b></p>
<p><b>Stückpreis</b></p>			
<p><b>Schiebegriff</b></p> 	<p>in exklusivem Design aus Metall, hochwertig beschichtet.</p> <p><b>Stückpreis</b></p> <p><b>Achtung:</b> der Wagen wird mit 1 seitlichen Griff um ca. 50 mm breiter.</p>	<p><b>Farbe:</b></p> <p>grau      <b>13801</b></p> <p>blau      <b>13802</b></p> <p>gelb      <b>13804</b></p>	<p><b>13801</b></p> <p><b>13802</b></p> <p><b>13804</b></p>
<p><b>Schiebegriff, kurz</b></p> 	<p>aus Metall, hochwertig beschichtet. Zur Montage vorne an einer Platte.</p> <p><b>Maße: 260 x 60 x 20 mm</b></p> <p><b>Stückpreis</b></p>	<p><b>Farbe:</b></p> <p>grau      <b>16166</b></p> <p>blau      <b>16167</b></p>	<p><b>16166</b></p> <p><b>16167</b></p>
<p><b>Schubladengriff</b></p> 	<p>ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe in 6 unterschiedlichen Farben.</p> <p><b>Stückpreis</b></p>	<p><b>Farbe:</b></p> <p>grau      <b>13161</b></p> <p>blau      <b>13162</b></p> <p>rotviolett      <b>13163</b></p> <p>gelb      <b>13164</b></p> <p>türkis      <b>13165</b></p> <p>weiß      <b>13166</b></p> <p>schwarz      <b>13167</b></p>	<p><b>13161</b></p> <p><b>13162</b></p> <p><b>13163</b></p> <p><b>13164</b></p> <p><b>13165</b></p> <p><b>13166</b></p> <p><b>13167</b></p>
<p><b>Schubladengriff</b></p> 	<p>aus ABS-Kunststoff mit Beschriftungsfenster.</p>	<p><b>Farbe:</b></p> <p>grau      <b>20061</b></p>	<p><b>20061</b></p>

## Schubladen

Bitte für die oberste Schublade eine **Schubladenabdeckplatte** dazu bestellen. Siehe Seite 14.

### für Wagen 45

**Schublade 45**



**100 mm hoch**, zur Montage unter einer Ablageplatte; mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.


**Innenmaße swingo®:**  
378 x 384 x 85 mm (B x T x H)

**Innenmaße swingo®-clinic:**  
356 x 396 x 85 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	
grau	<b>13181</b>	<b>13891</b>	
blau	<b>13182</b>	<b>13892</b>	
gelb	<b>13184</b>	<b>13894</b>	
türkis	<b>13185</b>	<b>13895</b>	

### für Wagen 60

**Schublade 60**



**100 mm hoch**, mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

**Innenmaße swingo®:**  
529 x 384 x 85 mm (B x T x H)

**Innenmaße swingo®-clinic:**  
506 x 396 x 85 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	
grau	<b>13101</b>	<b>13211</b>	
blau	<b>13102</b>	<b>13212</b>	
gelb	<b>13104</b>	<b>13214</b>	
türkis	<b>13105</b>	<b>13215</b>	

**Schublade 45**



**200 mm hoch** zur Montage unter einer Ablageplatte. Mit schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

**Innenmaße swingo®:**  
378 x 384 x 190 mm (B x T x H)

**Innenmaße swingo®-clinic:**  
356 x 396 x 190 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	
grau	<b>16001</b>	<b>16011</b>	
blau	<b>16002</b>	<b>16012</b>	
gelb	<b>16004</b>	<b>16014</b>	
türkis	<b>16005</b>	<b>16015</b>	

**Schublade 60**




**200 mm hoch**, zur Montage unter einer Ablageplatte. Mit Reling, schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

**Innenmaße swingo®:**  
529 x 384 x 190 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	
grau	<b>13201</b>		
blau	<b>13202</b>		
gelb	<b>13204</b>		
türkis	<b>13205</b>		

**Schublade 60**



**200 mm hoch**, mit Reling, schwebelichter Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.

**Innenmaße swingo®-clinic:**  
506 x 396 x 190 mm (B x T x H)

		swingo®-clinic Metall	
Griff	Ref.-Nr.	Ref.-Nr.	
grau		<b>13221</b>	
blau		<b>13222</b>	
gelb		<b>13224</b>	
türkis		<b>13225</b>	

#### Aufpreis für abschließbare Schubladen 45

##### 100 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
<b>13994</b>		<b>15869</b>	

##### 200 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
<b>13995</b>		<b>15869</b>	

#### Aufpreis für abschließbare Schubladen 60

##### 100 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
<b>13962</b>		<b>15003</b>	

##### 200 mm hoch

swingo® Holz-Kunststoff		swingo®-clinic Metall	
Ref.-Nr.		Ref.-Nr.	
<b>13990</b>		<b>15003</b>	

## Beheizbare Schublade / Schubladeneinsätze

### für Wagen 45

#### Schubladeneinsatz 45



mit variabler Einteilung aus Kunststoff, transparent mit 1 Bahn und 4 Teilern, herausnehmbar und spülmaschinenfest.

für **swingo®**  
**Maße: 377 x 384 x 58 mm (B x T x H)**  
 für **swingo®-clinic**  
**Maße: 356 x 389 x 58 mm (B x T x H)**

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16720</b>	<b>16722</b>

### für Wagen 60

#### Schublade 60 beheizbar



100 mm hoch, 450 mm tief.

**Maße der heizbaren Fläche:**  
**526 x 381 x 37 mm (B x T x H)**

für **swingo®**

swingo® Holz-Kunststoff	
Griff	Ref.-Nr.
grau	<b>13401</b>
blau	<b>13402</b>
gelb	<b>13404</b>
türkis	<b>13405</b>

#### Schubladeneinsatz 60



mit variabler Einteilung aus Kunststoff transparent mit 2 Bahnen und 6 Teilern, herausnehmbar und spülmaschinenfest.

für **swingo®**  
**Maße: 529 x 384 x 58 mm (B x T x H)**  
 für **swingo®-clinic**  
**Maße: 506 x 389 x 58 mm (B x T x H)**

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16719</b>	<b>16721</b>

## Verplombung / PC-Halter

#### Verplombung



für jeweils maximal 3 Schubladen; aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).  
 – ohne Plomben –

**Maße: 57 x 95 x 260 mm (B x T x H)**

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13958</b>	<b>13958</b>

**Plomben**, Kunststoff, blau für Einmalbenutzung pro 100 Stück.

<b>13998</b>	<b>13998</b>
--------------	--------------

#### Verplombung



für jeweils maximal 3 Schubladen; aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).  
 – ohne Plomben –

**Maße: 57 x 95 x 260 mm (B x T x H)**

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13958</b>	<b>13958</b>

**Plomben**, Kunststoff, blau für Einmalbenutzung pro 100 Stück.

<b>13998</b>	<b>13998</b>
--------------	--------------

#### PC-Halter



zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil, rechts oder links. Höhenverstellbar, passend für alle gängigen Geräte inkl. Halteband.

Stahl pulverbeschichtet  
 weißaluminium (RAL 9006).

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
rechts <b>16339</b>	<b>16339</b>
links <b>16345</b>	<b>16345</b>

#### PC-Halter



zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil, rechts oder links. Höhenverstellbar, passend für alle gängigen Geräte inkl. Halteband.

Stahl pulverbeschichtet  
 weißaluminium (RAL 9006).

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
rechts <b>16339</b>	<b>16339</b>
links <b>16345</b>	<b>16345</b>

## Platten / Auszugsplatten

### für Wagen 45

**Platte, 300 mm tief**



22 mm stark, **Breite 450 mm.**

Farbe für

**swingo®:** weiß

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>14692</b>	<b>14973</b>

### für Wagen 60

**Platte, 300 mm tief**



22 mm stark, **Breite 600 mm.**

Farbe für

**swingo®:** weiß

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13905</b>	<b>13944</b>

**Platte, 450 mm tief**



22 mm stark, **Breite 450 mm.**

Geeignet als **Schubladenabdeckplatte** oder als **Ablageplatte.**

Farbe für

**swingo®:** weiß

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>14691</b>	<b>14693</b>

**Platte, Edelstahl, 450 mm tief**



mit Schwallkante, 25 mm stark, 7 mm hoch. **Breite 600 mm.** Geeignet als robuste **Arbeitsplatte** oder **Schubladenabdeckplatte.** Unempfindliche, pflegeleicht Leinenstruktur.

Stellfläche: 570 x 450 mm (B x T)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>14710</b>	<b>14710</b>

**Platte, 450 mm tief**



22 mm stark, **Breite 600 mm.**

Geeignet als **Schubladenabdeckplatte** oder als **Ablageplatte.**

Farbe für

**swingo®:** weiß

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13904</b>	<b>13942</b>

**Platte, 300 mm tief neigbar**

22 mm stark, **Breite 600 mm.** In der Neigung stufenlos verstellbar. Ideal für Monitore oder als Schreibplatte.

Farbe für

**swingo®:** weiß

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13965</b>	<b>13946</b>

**Platte, 450 mm tief neigbar**



22 mm stark, **Breite 600 mm.** In der Neigung stufenlos verstellbar, max. Neigungswinkel 20°. Ideal für Monitore oder als Schreibplatte. Belastung max. 10 kg.

Farbe für

**swingo®:** weiß

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13964</b>	<b>13945</b>

**Auszugsplatte 45**



ca. 22 mm stark, für Keyboard, Drucker oder andere Geräte; Griff grau. Belastung max. 10 kg.

**Maße: 450 x 450 mm (B x T)**

Farbe für

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.
<b>16712</b>

**Auszugsplatte 60**



ca. 32 mm stark, für Keyboard, Drucker oder andere Geräte; Griff grau. Belastung max. 10 kg.

**Maße: 600 x 450 mm (B x T)**

Farbe für

**swingo®-clinic:** grauweiß RAL 9002

swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.
<b>16703</b>

## Auszugsplatte / Antirutschmatten / Seitliche Platten / Aufsatzplatte

### für Wagen 45

### für Wagen 60

#### Auszugsplatte 60



für Keyboard ca. 32 mm stark mit Mousepad-Auszug nach rechts oder links ausziehbar. Griff grau. Belastung max. 10 kg.

**Maße: 600 x 450 mm (B x T)**

Farbe für **swingo®clinic**: grauweiß RAL 9002

<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.
<b>16715</b>

**Antirutschmatte für Ablageplatten 45** aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA), transparent, geräuschkämmend.  
**Maße: 450 x 450 mm (B x T)**

**Antirutschmatte für Ablageplatten 60** aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA), transparent, geräuschkämmend.  
**Maße: 600 x 450 mm (B x T)**

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>15541</b>	<b>15541</b>

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13950</b>	<b>13950</b>

**Maße: 450 x 300 mm (B x T)**

**Maße: 600 x 300 mm (B x T)**


**16161**

**16161**

**13949**

**13949**

#### Seitliche Platte

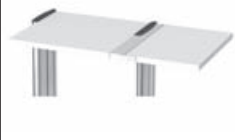

**abklappbar**, seitlich rechts oder links am Trägerprofil montiert. Tragkraft 15 kg.

**Maße: 350 x 450 mm (B x T)**

#### Seitliche Platte



**abklappbar**, seitlich rechts oder links am Trägerprofil montiert. Tragkraft 15 kg.

**Maße: 350 x 450 mm (B x T)**

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13996</b>	<b>13997</b>

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13996</b>	<b>13997</b>

#### Aufsatzplatte 45



mit 10 mm Aufkantung, weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet.

**Maße: 450 x 450 x 10 mm (B x T x H)**

#### Aufsatzplatte 60



mit 10 mm Aufkantung, weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet.

**Maße: 600 x 450 x 10 mm (B x T x H)**

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13991</b>	<b>13991</b>

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13992</b>	<b>13992</b>

Galerie / Monitorkonsolplatte / Halter für Monitorkonsolplatte / Quertraversen

für Wagen 45

für Wagen 60

**Monitorkonsolplatte**



Stahlblechplatte für Schwenkarm, weißaluminium (RAL 9006) beschichtet. Bis 15 kg Traglast bei ausreichender Gegenlast im Geräteträger.

**Maße: 350 x 350 x 10 mm (B x T x H)**

**Wir fertigen jedes Sondermaß nach Ihren Angaben. Fragen Sie uns!**

- Auslaufmodell -

**Monitorkonsolplatte**



Stahlblechplatte für Schwenkarm, weißaluminium (RAL 9006) beschichtet. Bis 15 kg Traglast bei ausreichender Gegenlast im Geräteträger.

**Maße: 350 x 350 x 10 mm (B x T x H)**

**Wir fertigen jedes Sondermaß nach Ihren Angaben. Fragen Sie uns!**

- Auslaufmodell -

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13952</b>	<b>13952</b>

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>13952</b>	<b>13952</b>

**Halter für Monitorkonsolplatte**



**drehbar**, zur Befestigung oben am Trägerprofil oder an einer Quertraverse, weißaluminium (RAL 9006).

**Bitte Monitorkonsolplatte Ref.-Nr. 13952 dazu bestellen.**

- Auslaufmodell -

**Halter für Monitorkonsolplatte**



**drehbar**, zur Befestigung oben am Trägerprofil oder an einer Quertraverse, weißaluminium (RAL 9006).

**Bitte Monitorkonsolplatte Ref.-Nr. 13952 dazu bestellen.**

- Auslaufmodell -

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16359</b>	<b>16359</b>

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16359</b>	<b>16359</b>

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555 bzw. 16554 unbedingt erforderlich.

**Quertraverse 45 Metall**



zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen. Bietet die Möglichkeit, vorne oder hinten z. B. eine Steckdosenleiste anzubringen. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).

**Maße: 450 x 20 x 100 mm (B x T x H)**

**Quertraverse 60 Metall**



zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen. Bietet die Möglichkeit, vorne oder hinten eine Normprofilschiene oder Steckdosenleiste anzubringen. Aus Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002).

**Maße: 601 x 20 x 100 mm (B x T x H)**

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16555</b>	<b>16555</b>

<b>swingo® Holz-Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic Metall</b>
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16554</b>	<b>16554</b>



## Traverse / Reling / Trägerplatte für Steckdosenleiste / Rückwand

### für Wagen 45

#### Traverse 45 Holz-Kunststoff



als zusätzliche hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung; **nicht zur Stabilisierung geeignet.**

weiß

Maße: 450 x 20 x 110 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	
Ref.-Nr.	
<b>13984</b>	

### für Wagen 60

#### Traverse 60 Holz-Kunststoff



als zusätzliche, hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung; **nicht zur Stabilisierung geeignet.**

weiß

Maße: 601 x 20 x 110 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	
Ref.-Nr.	
<b>13983</b>	

#### Reling 45



für Ablageplatte, **450 mm breit**, 450 mm tief, weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet, Ø 8 mm. Montage am Trägerprofil.

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16646</b>	<b>16646</b>

#### Reling 60



für Ablageplatte, **600 mm breit**, 450 mm tief, weißaluminium (RAL 9006), pulverbeschichtet, Ø 8 mm. Montage am Trägerprofil.

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16648</b>	<b>16648</b>

#### Trägerplatte 45



für **Steckdosenleiste**. Aus Metall, grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet; variabel montierbar hinten, innen oder unten. Durch die zurückgesetzte Montagemöglichkeit innerhalb der Profile, werden Stecker vor Beschädigung geschützt. **Nicht zur Wagenstabilisierung geeignet.**

Maße: 450 x 12 x 60 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16235</b>	<b>16235</b>

#### Trägerplatte 60



für **Steckdosenleiste**. Aus Metall, grauweiß (RAL 9002) pulverbeschichtet; variabel montierbar hinten, innen oder unten. Durch die zurückgesetzte Montagemöglichkeit innerhalb der Profile, werden Stecker vor Beschädigung geschützt. **Nicht zur Wagenstabilisierung geeignet.**

Maße: 600 x 12 x 60 mm (B x T x H)

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>16236</b>	<b>16236</b>

#### Rückwand 60 für Basismodell



aus robustem Metall, weiß (RAL 9010) mit Einrastmechanismus.

Maße: 600 x 645 mm (B x H)

**Bitte zusammen mit Wagen bestellen, da keine nachträgliche Montage möglich.**

Rückwand in Sondermaßen auf Anfrage.

swingo® Holz-Kunststoff	swingo®-clinic Metall
Ref.-Nr.	Ref.-Nr.
<b>14714</b>	<b>14714</b>

# Zubehör für **swingo**<sup>®</sup> + **swingo-clinic**<sup>®</sup> 45 und 60

## Abfallsammler / Abwurf / TFT-Halter / Halterung für Tablet/iPad

Die Referenznummern beinhalten das Zubehöerteil komplett mit Befestigungsmaterial. Alle Zubehöerteile lassen sich einfach an den Wagen **swingo**<sup>®</sup> und **swingo-clinic**<sup>®</sup> montieren.

### Abfallsammler „tomo“



aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100% Polypropylen), grau (RAL 7045), mit abnehmbarem, Deckel und mit Halterung. Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. B 450 x H 350 mm).

**Maße:**  
315 x 180 x 315 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 14097

für Normschiene  
Ref.-Nr. 14066

### Abfallsammler „tango“



praktische Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung. Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016), inkl. Befestigungsmaterial.

Inhalt 8 Liter  
**Maße:**  
220 x 220 x 360 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 16701

Inhalt 20 Liter  
**Maße:**  
350 x 250 x 520 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 16702

Bitte für die Befestigung am Wagen zusätzlich 2 Normprofilsschienen, Ref.-Nr. 13924 (Seite 21) bestellen.

### Abwurf für Instrumente



mit Polypropylen-Schale, weiß und Halterung, sterilisierfähig bis 134° C.

**Maße:**  
300 x 230 x 130 mm (B x T x H)

mit Schlitzdeckel  
Ref.-Nr. 13912

ohne Schlitzdeckel  
Ref.-Nr. 13960

### Abwurf



Schale aus Edelstahl, Ø 320 mm, mit Befestigungskloben.

Ref.-Nr. 13911

### TFT-Halter



für Flachbildschirm (VESA-Standard 75 und 100 mm). Montage an höhenverstellbarer Stange seitlich am Profil oder an einer Quertraverse. Bitte Quertraverse separat bestellen.

Traglast bis max. 15 kg  
Ref.-Nr. 16346

### Schwenkarm mit TFT-Halter



für Flachbildschirme (VESA-Standard 75 und 100 mm), weiß-aluminium (RAL 9006). Dreh- und neigbar. Arm schwenkbar, Schwenkbereich 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. 16638

### Halterung für Tablet/iPad



zur Montage an Quertraverse, nur werksseitig montierbar. Aluminium eloxiert, einstellbar von 7" - 10". Horizontal und vertikal drehbar und neigbar, inklusive Diebstahlschutz.

Bitte Traverse separat bestellen (Siehe Seite 17).

**Maße:**  
123 x 97 x 338 mm (B x T x H)

Ref.-Nr. 20849

**NEU**

## „alegro“ Monitorträgersystem

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.

### „alegro“ Halter für Monitor



auf fest eingestellter Edelstahl-Stange im Trägerprofil befestigt. Höhe ca. 400 mm oberhalb des Profils.

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. **25023**

Traglast bis max. 18 kg  
Ref.-Nr. **25049**

### „alegro“ Halter für Doppelmonitoring



an Alu-Traverse zwischen zwei Trägerprofilen für optimale Synchron-einstellung. Kabelführung in den Profilen.

für **Wagen 60**

Traglast bis max. 2 x 12 kg  
Ref.-Nr. **25003**

Traglast bis max. 2 x 18 kg  
Ref.-Nr. **25029**

### „alegro“ Halter für Monitor



an Alu-Traverse zwischen zwei Trägerprofilen. Kabelführung in den Profilen.

für **Wagen 45/60**

Traglast bis max. 12 kg  
Wagen 45 Ref.-Nr. **25064**  
Wagen 60 Ref.-Nr. **25062**

Traglast bis max. 18 kg  
Wagen 45 Ref.-Nr. **25055**  
Wagen 60 Ref.-Nr. **25063**

### „alegro“ Halter für Monitor auf Quertraverse



aus Metall, grauweiß, (RAL 9002).

für **Wagen 45**  
**Maße: 450 x 127 x 522 mm (B x T x H)**

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. **12251**

für **Wagen 60**  
**Maße: 600 x 127 x 522 mm (B x T x H)**

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. **12250**

### „alegro“ Monitorhalter auf Schwenkarm



mit 1 Drehgelenk und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. **25024**

Traglast bis max. 18 kg  
Ref.-Nr. **25050**

### „alegro“ Monitorhalter auf Schwenkarm



mit 2 Drehgelenken und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. **25020**

Traglast bis max. 18 kg  
Ref.-Nr. **25046**

### „alegro“ Monitorhalter auf Gelenkarm



mit Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil und integrierter Kabelführung. Ausladung: 300 mm.

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. **25013**

Traglast bis max. 18 kg  
Ref.-Nr. **25039**

### „alegro“ Monitorhalter auf Doppelgelenkarm




mit Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil und integrierter Kabelführung. Ausladung: 2 x 150 mm.

Traglast bis max. 12 kg  
Ref.-Nr. **25014**

Traglast bis max. 18 kg  
Ref.-Nr. **25040**

Verbandmittelspender / Injektionssets / KOMBI-Set

**Verbandmittel-  
spender COMPACT**

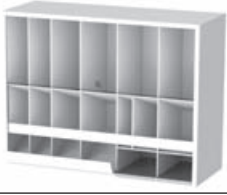

Qualitativ hochwertiges Gehäuse, weiß kunststoffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben, griff-technisch optimale Einteilung; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

**Maße:**  
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 13913

**Injektionsset  
COMPACT**



Qualitativ hochwertiges Gehäuse, weiß kunststoffurniert, staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben, griff-technisch optimale Einteilung; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

**Maße:**  
600 x 220 x 450 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 13914

**Injektionsset  
PicBox®**



**Der Spender nach First-in/first-out Prinzip und Staubschutz nach DIN 58953.** Grauweißes Kunststoffgehäuse mit glasklaren Schütten und Staubschutzdeckeln. Die Schütten werden von oben befüllt, das Material unten entnommen. Bestehend aus Spritzen-spender mit 3 Schütten und Kanülen-spender mit 5 Schütten; zum Verschrauben zwischen den Profilen.

**Maße:**  
600 x 220 x 410 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 13915

**KOMBI-Set**



aus unzerbrechlichem, grauweißen, Kunststoff, für Blutentnahme und Injektion. Bestehend aus Tupferspender „TAKEFIX“ und Tupferbefeuchter „TIPPFIX“ sowie Zusatzbehälter.

Empfehlenswert als Anbauteil für das Injektionsset PicBox®.

**Maße:**  
120 x 225 x 270 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 13916

Diverse Zubehörartikel

**Standsicherung**



Set mit 4 Standsicherungsecken aus schwarzem Zellgummi, einseitig klebend. Zur Sicherung der Geräte, wenn der Wagen bewegt wird.

**Maße:**  
40 x 40 x 5 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 17222

**Universalhalter  
Snap**



für Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues oder Wischtüchern. Ein federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis 1 kg für Einhandbedienung bereit. Mit Halterung für Trägerprofil.

Ref.-Nr. 15606

**Halter für  
Spenderboxen**



aus Edelstahl, gebürstet. Passend für 1 bis 4 gängige Spenderboxen mit Einmalhandschuhen, Tissues, mit Befestigungsmaterial für **swingo** oder **swingo-clinic**.

Halter 1-fach (für 1 Box)  
**Innenmaße:**  
142 x 94 x 250 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 13026

Halter 3-fach (für 3 Boxen)  
**Innenmaße:**  
253 x 94 x 394 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 13027

Halter 4-fach (für 4 Boxen)  
**Innenmaße:**  
253 x 94 x 525 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 05071

**Kanülensammler  
Schluckfix**



Einmalbehälter zur Aufnahme von ca. 500 gebrauchten Kanülen. Aus schwarzem Recycle-Kunststoff.

**Maße:**  
55 x 100 x 170 mm (B x T x H)

**Schluckfix-Set**  
mit 20 Boxen, inkl. Halterung

Ref.-Nr. 13917

**Schluckfix Originalkarton**  
mit 100 Boxen, ohne Halterung

Ref.-Nr. 09490  
separat für Schluckfix  
Ref.-Nr. 13918

**Halterung**

**Sensor-Spender**



aus Aluminium natur eloxiert, für 1 Liter Standardflasche mit Seifen- und Desinfektionsmitteln. Halterung aus Edelstahl, rechts oder links montierbar. Bei Bestellung bitte angeben.

**Maße:**  
95 x 210 x 290 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 16204

**Abtropfschale**

separat, herausnehmbar  
Ref.-Nr. 16256

**Seifen- und Desinfektionsmittelspender**



Befestigung rechts oder links möglich. Aus Aluminium natur eloxiert. Für Standardflaschen mit Inhalt 1 Liter.

**Maße:**  
95 x 185 x 290 mm (B x T x H)  
Ref.-Nr. 16087

**Abtropfschale**

separat, herausnehmbar  
Ref.-Nr. 16256

**Entsorgungsbox  
„Medi-Müll“  
à 1,5 Liter**



aus gelbem Polypropylen und grünem Deckel. Mit 3 praktischen Abstreifhilfen für alle Kanülentypen, auch Vacutainer. Ideal geeignet für Skalpelle, Pipetten, Glasbruch, Tupfer usw.

Höhe 152 mm  
Ø des Deckels 143 mm,  
Ø des Bodens 108 mm

Set mit **20 Boxen** und Halterung.

Ref.-Nr. **13919**

Staffelpreise auf Anfrage.

**„Medi-Müll“**

Karton mit **100 Boxen**, ohne Halterung

Ref.-Nr. **16653**

**Halterung**

separat für „Medi-Müll“

Ref.-Nr. **13920**

**Armauflage**



schwarz, gepolstert mit Integral-schaum, mit 2 Befestigungskloben, besonders stabil.

Ref.-Nr. **13923**

**Katheter-Köcher**



aus Edelstahl, 3-fach unterteilt, zum Einhängen an Normprofilschiene.

**Maße:**  
**160 x 96 x 570 mm (B x T x H)**

Ref.-Nr. **13959**

Bitte Normprofilschiene Ref.-Nr. 13924 zur seittl. Befestigung dazu bestellen.

**Halterung**



für 2 L Sauerstoff-Flasche, silber-aluminium.

Oberer Haltering Ø 102 mm,  
unterer Haltering Ø 84 mm.

Ref.-Nr. **13956**

**Infusions-  
flaschenhalter**



verchromt, mit 4 Haken, Ø 25 mm, für Einhandbedienung.

Ref.-Nr. **13927**

**„CUPFIX“  
Ampullenöffner**



**Halterung**

Gehäuse aus Kunststoff, grauweiß. Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar. Diamantfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert.

**Maße:**  
**70 x 150 x 200 mm (B x T x H)**

Ref.-Nr. **13921**

Ersatz-Diamantfeile für „CUPFIX“  
Ref.-Nr. **04663**

separat für „CUPFIX“

Ref.-Nr. **13922**

**Reanimationsbrett  
mit Halterung**



aus robustem blauen Polyäthylen, sehr stabil und trotzdem leicht (2 kg). Belastung bis 150 kg. Halterung aus Edelstahl. Anatomisch geformte Kopfmulde für richtige Positionierung bei Herzdruckmassage. Verwendbar für Wagenrückwände von min. 380 mm Höhe.

**Maße:**  
**600 x 420 x 60 mm (B x T x H)**

Ref.-Nr. **17370**

**Normprofilschiene**



zur **seitlichen** Befestigung. Aus Edelstahl mit 2 Befestigungspunkten.

**Länge 420 mm**

Ref.-Nr. **13924**

**Normprofilschiene**



zur **rückseitigen** Befestigung. Aus Edelstahl mit 2 Befestigungspunkten.

**Länge 440 mm**

Ref.-Nr. **13953**

**Halterung**



für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter mit Flaschendurchmesser 145 mm; inkl. oberem Haltebügel mit flexiblem Band.

Ref.-Nr. **16322**

**Zusätzlicher Haltebügel**  
mit flexiblem Band, separat

Ref.-Nr. **16324**

**Endoskophalterung/  
Plexiglasschutzrohr**



Universal-Endoskophalterung aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten für Endoskope und Zubehör. Höhenverstellbare Stange zur Einhandbedienung.

Ref.-Nr. **13979**

Plexiglasschutzrohr, 1200 mm lang unten offen. Innen Ø 3,2 cm. Außen Ø 40 mm mit Halteklammern für **swingo®**

Ref.-Nr. **13977**

dto., unten geschlossen, für Desinfektionslösung.

Ref.-Nr. **13978**

#### Kabel- und Schlauchhalter



grau, Ausladung ca. 950 mm. Rohre aus silberfarbenem Aluminium mit Einhand-Druckknopf-Verstellung. 2 Gelenke, 2 Kabelführungselemente, inkl. Befestigungskloben.

Ref.-Nr. **13926**

#### Kabel- und Schlauchhalter



mit Flexwelle. 2 Gelenke aus Kunststoff, Rohre aus silberfarbenem Aluminium, Flexwelle verchromt, inkl. Befestigungskloben.

Ref.-Nr. **16651**

#### Haken



aus weißem Kunststoff.

**Maße:**  
**34 x 66 x 70 mm (w x d x h)**

Ref.-Nr. **15171**

#### Kabelklammer



aus grauem Kunststoff. Zur Befestigung in den Profilmuten.

Ref.-Nr. **19015**

#### Halter für Kensingtonschloss



zur Diebstahlsicherung von Notebooks. Befestigung am Trägerprofil. Ohne Schloss.

Ref.-Nr. **16424**

#### Halterung für Kamera



aus Kunststoff (POM = Polyoxymethylen).

**Maße:**  
**25 x 6 x 40 mm (B x T x H)**

Ref.-Nr. **15390**

#### Halux® LED F 7-P



LED-Untersuchungsleuchte mit federentlastetem Gelenkarm. Leuchtenkopf mit doppelwandigem Gehäuse zur optimalen Kühlung.

Lichtleistung: **15.000 Lux / 0,5 m**

Anschlussspannung: 100 - 240 V; 50/60 Hz

Ref.-Nr. **05522**

Befestigungskloben für **swingo®**

Ref.-Nr. **14659**

Weitere LED-Leuchten auf Anfrage.

#### Befestigungskloben



zum universellen Einsatz für alle Anbauteile an **swingo®** und **swingo®-clinic**. Geeignet für die Aufnahme von Rundrohren Ø 10 mm und Ø 16 mm.

Ref.-Nr. **13929**

#### Steckdosenleiste 4-fach



4 Schutzkontakt Dosen, grüner 2-poliger Schalter, hellgraues Kabel, 3 m lang mit angegossenem Schuko-stecker, Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert mit 2 grauen Kunststoff-Befestigungswinkeln.

**Maße:**  
**269 x 44 x 44 mm (B x T x H)**

Ref.-Nr. **21693**

Weitere Steckdosenleisten finden Sie im separaten Elektro-Zubehör-Programm.

## Elektro-Zubehör

Passend zu den Wagensystemen bieten wir Ihnen ein umfassendes Elektro-Programm in speziellen Ländervarianten an. Fragen Sie uns!

- Das Programm beinhaltet:
- Standard-Steckdosenleisten
  - Modulare Steckdosenleisten
  - Zentrale Ein- / Ausschalter
  - Trenntransformatoren (Stand- und Unterbau-Modelle)
  - Potentialausgleich-System MultiContact POAG
  - Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14
  - Kabelmanagement und Aussteckschutz

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE 20235235




# swingo Planungskizze für individuelle Profilhöhe, Rasterhöhe 52 mm

swingo swingo-clinic

Holz-Kunststoff

Metall

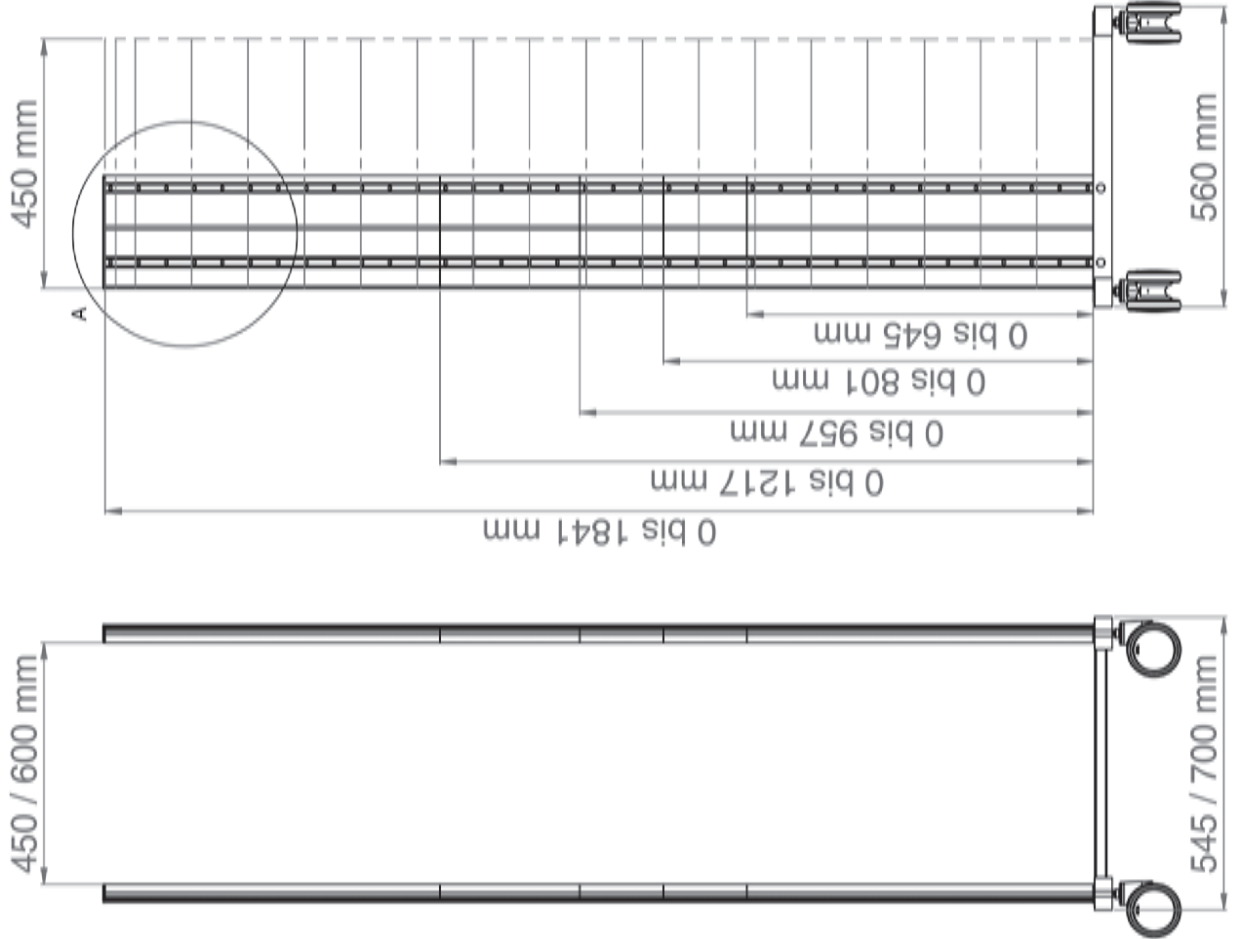

Fahrgestelle / Rollen / Traglast:



Rollen Ø100

(swingo bis 120 kg)  
(swingo-clinic bis 130 kg)

Wagen

45

60

mit 2  
Fest-  
stellern

45

60



Rollen Ø125, 2 feststellbar

(swingo bis 120 kg)  
(swingo-clinic bis 130 kg)

45

60



Rollen Ø150, 2 feststellbar

(swingo bis 120 kg)  
(swingo-clinic bis 250 kg)

60

60



Rollen Ø100

mit Bodenplatte 300 mm tief  
(swingo bis 120 kg)  
(swingo-clinic bis 130 kg)

45

60

mit 2  
Fest-  
stellern

45

60



Rollen Ø150; 2 feststellbar

nach hinten verlängert,  
elektrisch leitfähig  
(swingo bis 120 kg)  
(swingo-clinic bis 250 kg)

60

60

4 elektr. leitfähige Rollen

Farbe der Dekorstreifen  
und Schiebegriffe

grau

blau

gelb

Profilhöhe

Standard

645 mm

801 mm

957 mm

1217 mm

Variabel

0 - 636 mm

0 - 1217 mm

0 - 1841 mm

(Raster = 52 mm)

Bei einer Profilhöhe ab 957 mm  
ist aus Stabilitätsgründen eine  
Quertraverse Ref.-Nr. 16555  
bzw. 16554 erforderlich.

### Unsere vielseitige Produktpalette



Ihr medizin-technischer Fachhändler

**HAEBERLE GmbH + Co. KG**

Breitwiesenstr. 13, DE-70565 Stuttgart

Postfach 800524, DE-70505 Stuttgart

Telefon +49 (0) 711 78314-0

Telefax +49 (0) 711 78314-77

info@haeberle-med.de

www.haerberle-med.de